




**Как использовать ScanBox<sup>pro</sup>**

# 1 / Запустите приложение DM

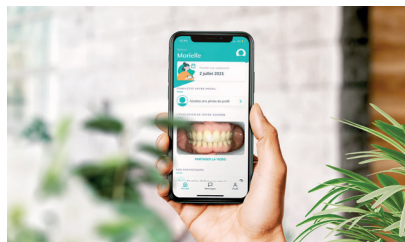

Перед каждым сканированием обязательно тщательно вымойте руки с мылом.

Встаньте перед зеркалом, начните работать со своим приложением DM. Убедитесь что ваш телефон без звука.

# 2 / Используйте трубку ретрактора, подходящую вашему рту

## ДЕЛАТЬ

Всегда используйте трубку ретрактора, которая соответствует размеру вашего рта. Если вы чувствуете себя некомфортно, обратитесь к врачу.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ

Использовать слишком маленькую трубку ретрактора, где не все зубы будут видны. Или использования слишком большой трубки, её использование может быть болезненным.

# 3 / Поместите смартфон в держатель для телефона



## ДЕЛАТЬ

Держите держатель телефона так, чтобы выверенная накладка на челюсти была повернута к вам. Откройте держатель нажав сбоку кнопку открытия и поместите заднюю часть телефона (без чехла) на держатель так, чтобы вспышка и объектив были совмещены с окном. Сильно нажмите на челюсть, чтобы зафиксировать телефон и на месте, убедитесь, что он надёжно закреплён.

Отрегулируйте положение окна, удерживая нажатой кнопку настройки и перемещая держатель вертикально, пока не увидите линзу и вспышку через окно.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ

Переворачивать телефон



## 4 / Вставьте трубку ретрактора в держатель телефона

### ДЕЛАТЬ

Прикрепите трубку ретрактора к держателю телефона. Вы услышите щелчок, когда он будет правильно прикреплен.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ

Использовать более одной трубки. Присоединить неправильный конец трубки к держателю.



## 5 / Вставьте трубку ретрактора в рот



### ДЕЛАТЬ

Вставьте трубку в рот сначала с одной стороны, затем с другой. Ваши зубы и десны должны быть полностью видны без какого-либо дискомфорта.



### ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ

Не кусайте трубку ретрактора. Он должен держать ваши губы подальше от зубов. Не оставляйте трубку вне рта. Вы должны вставить трубку в рот перед сканированием.

## 6 / Дважды коснитесь экрана, чтобы начать сканирование



### ДЕЛАТЬ

При сканировании ваши движения должны быть широкими от уха до уха. Чтобы убедиться, что все ваши зубы, в том числе и задние просканированы. Держите свои движения сосредоточенными, должен двигаться только ScanBox и мобильный телефон, не ваша голова. Следите за скоростью датчика на экране вашего телефона.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ

Оставлять язык перед зубами. С силой выдыхать с широко открытым ртом, чтобы избежать запотевания объектива камеры.

## 7 / Слушайте инструкцию вашего приложения

В качестве дополнительных сканов могут быть запрошены следующие позиции.



### Рот слегка приоткрыт

Это означает, что между верхними и нижними зубами должно оставаться пространство размером в палец.



### Рот закрыт

Это означает – прикусите но держите рот раздвинув губы так, чтобы верхние и нижние зубы были видны как можно шире, ослабляя трубку ретрактора.





### Рот широко открыт

Это означает – что, откройте рот как можно шире, не ослабляя при этом трубку.





# Описание ScanBox pro


## ScanBox описание

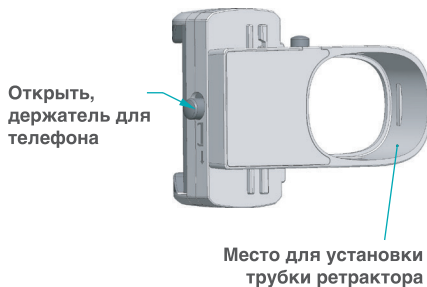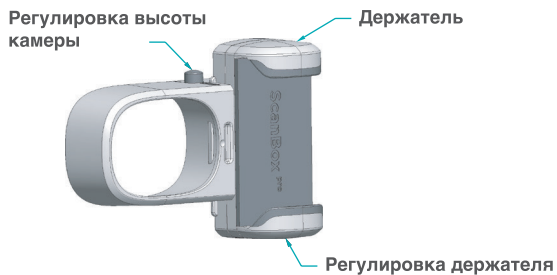


## Трубка ретрактора

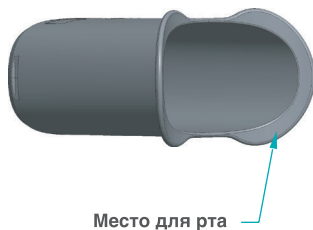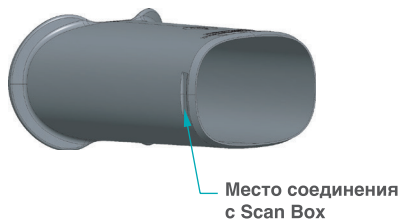

Вид спереди с вставленным телефоном в ScanBox

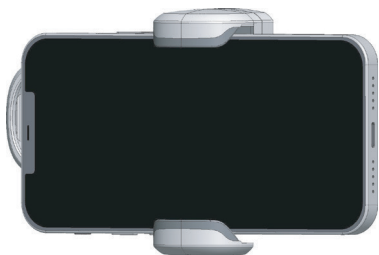

Вид сзади с вставленным телефоном в ScanBox. Убедитесь что камера находится по середине окна

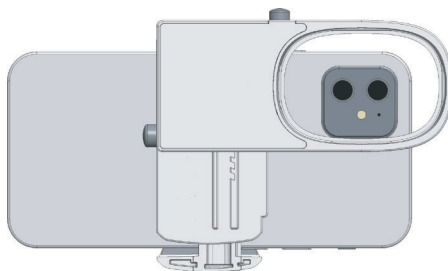



# DentalMonitoring

[dental-monitoring.com](https://dental-monitoring.com)



DentalMonitoring is a product designed and manufactured by Dental Monitoring SAS, under the DentalMind branding for Healthcare Professionals (HCP). It is also used by patients under the mandatory supervision of Health Care Professional (HCP). DentalMonitoring is designed to assist HCP, registered at DentalMind, in observing remotely intra-oral situations and monitoring orthodontic treatments. DentalMonitoring product is a medical device (in Europe only), registered as such and holding the CE mark. Refer to your HCP and/or the Instructions for Use before use. Products availability, claims and regulatory status may differ across countries depending on local regulations. Contact your local representative for further information.